


Måling af blodtryk over 24 timer - når apparatet skal midlertidigt af og på

Du skal have målt dit blodtryk over 24 timer. Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du skal have apparatet midlertidigt af og på igen.

ABPM 7100

1. Manchetforbindelse
2. ON/OFF-knap
3. START-knap

Figur

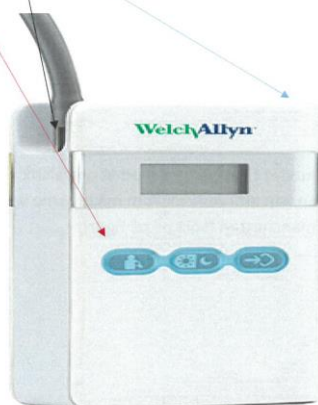

NÅR APPARATET SKAL AF

Hvis du har brug for at tage apparatet af i en kortere periode, fx når du skal i bad, skal du gøre følgende:

- Tryk på on/off-cirkelikonet (den blå cirkel, som den blå pil på figuren peger hen til) i 3 sekunder.
- Når teksten i displayet forsvinder, er apparatet slukket. Der lyder et lille bip. Du kan nu tage manchet og bælte af.

NÅR APPARATET SKAL PÅ

- Tag manchet og bælte på igen. Husk, at manchettens pilemarkering skal sidde 2-3 centimeter over albuebøjningen og 2-3 centimeter ind mod kroppen.

- Tryk på on/off-cirkelikonet (den blå cirkel, som den blå pil på figuren peger hen til). Hold knappen inde i 3 sekunder, indtil displayet er tændt. Der lyder et bip.

ANNULLERING AF MÅLING

- Tryk i 1 sekund på en tilfældig knap. Der lyder 5 bip, og displayet viser STOP.

UDFØR EN MÅLING

- Tryk 1-2 sekunder på ikonet med overkroppen. Der lyder et bip, og målingen starter.

AFTAG MANCHET

Manchetten er forbundet til apparatet med et metalstik. Manchetttilslutningen kan afbrydes mellem målingerne ved at tage det metalstik, der sidder for enden af manchetten, ud (sort pil på figur).

KONTAKT OG MERE VIDEN

Har du spørgsmål eller problemer, er du velkommen til at kontakte os



Kontakt

Endokrinologisk Bioanalytisk Afsnit
Tlf. 97 66 36 03
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 14.00